


PROCONE

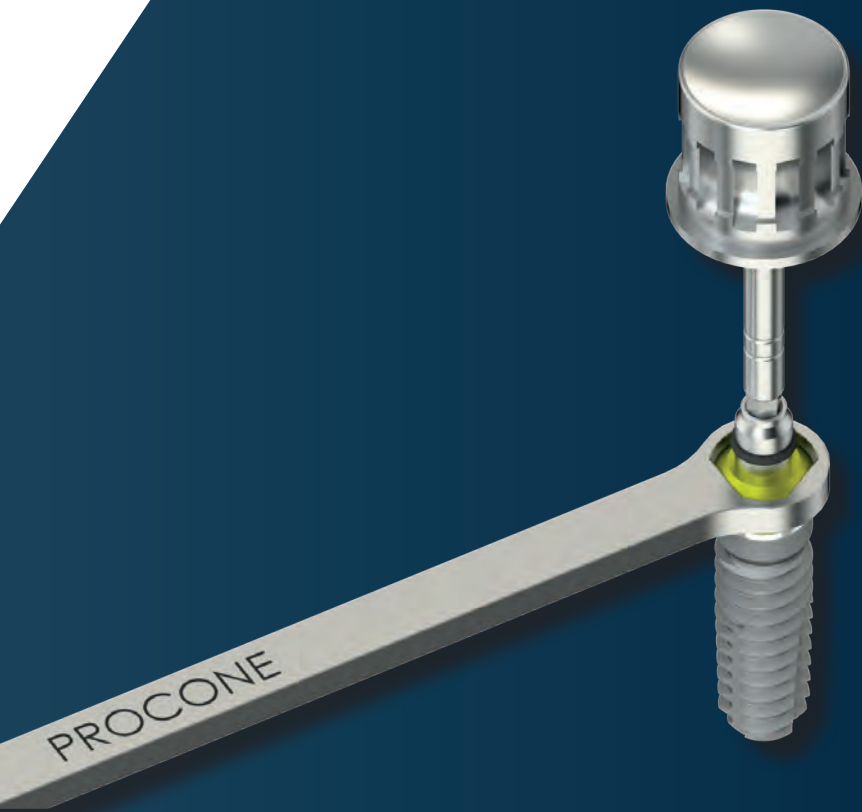

IPS

IMPLANT SYSTEMS

PROCONE

Katalog 2021/22

Vertrieb Österreich durch



Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen



Systembeschreibung

Produktvorstellung	6
Chirurgie Tray	8
Bohrer	10
Bohrprotokoll	12
Chirurgische Vorgehensweise	13
Implantatverpackung	14
Implantatentnahme	16
Implantatinsertion	17

Produktkatalog

Chirurgie	18
Prothetik	26
Werkzeug Prothetik	52
Zubehör	59



Im Mittelpunkt stehen unsere Kunden und Ihre Patienten.

Dieser Leitspruch wird von Medidental Care täglich gelebt. Medidental Care ist ein unabhängiges, österreichisches Unternehmen im Besitz der Familien Mörixbauer und Weilguni. Medidental Care positioniert sich als spezialisierter Handelspartner und Dienstleister im Bereich der dentalen Implantologie und Prothetik, Knochen- und Weichgeweberegeneration sowie der innovativen, digitalen Zahnheilkunde und Zahntechnik.

Medidental Care GmbH

Pucheggerstraße 2, A-4844 Regau
Telefon: 0043 (0) 7672 22530
E-Mail: office@medidental-care.at
Internet: www.medidental-care.at

Medidental Care setzt auf Fortbildung.

Unter dem Titel „Dental Education Center“ bieten wir in Regau, nahe des schönen Attersees, interessante CAD/CAM Kurse und Fortbildungen für Implantologen, Zahnärzte, zahnärztliche Assistenz und Techniker an. Das aktuelle Kursprogramm können Sie auf unserer Homepage bequem online buchen. Vielleicht ist auch für Sie etwas dabei – wir würden uns freuen, Sie demnächst im schönen Salzkammergut begrüßen zu dürfen.

Das Medidental Care Team steht für Fachkompetenz, Kundennähe, Service und Support.

„Jahrzehntelange Erfahrung im Dentalbereich, das damit einhergehende universell erworbene Fachwissen sowie das kontinuierliche Vertrauen unserer Kunden bilden unsere Basis für Innovation und Erfolg“, sagt Geschäftsführer Christian Weilguni. Unser Team aus spezialisierten Medizinprodukteberatern und Support & Service-Mitarbeitern steht Ihnen jederzeit gerne für Ihre Bestellungen, Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Wir stellen uns vor und freuen uns, jederzeit von Ihnen zu hören.



**Willkommen in der
Auftragsannahme
+43 7672 22530**

Mag. Anita Wagner
Sandra Mörixbauer
Selina Mörixbauer
Isabella Mörixbauer
Daniel Mörixbauer

**Immer ein offenes Ohr für Sie:
Unsere MP-Berater im Außendienst**

Christian Weilguni

Medizinprodukteberater, Geschäftsführer
Mobiltelefon: +43 664 82 22 580
E-Mail: c.weilguni@medental-care.at

Till Weller

Medizinprodukteberater
Mobiltelefon: +43 664 96 95 871
E-Mail: t.weller@medental-care.at

Mag. Clemens Gruber

Medizinprodukteberater
Mobiltelefon: +43 664 23 55 930
E-Mail: c.gruber@medental-care.at





CAD / CAM Support:

Valton Kastrati
Alexander Altendorfer
Herwig Mörixbauer
Ing. Karl Steinbauer
ZTM Stefan Remplbauer

PROCONE

KRESTALES MIKROGEWINDE

Förderung der Anlage von Knochenzellen und deren Erhalt durch das 3-fache Mikrogewinde*. Bei weichem Knochen und/oder Sinuslift wird die Primärstabilität durch das raue Mikrogewinde deutlich erhöht.

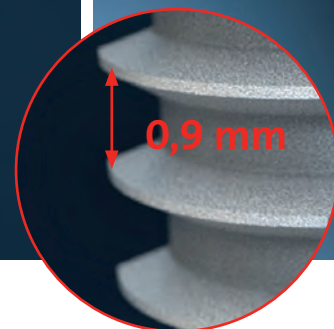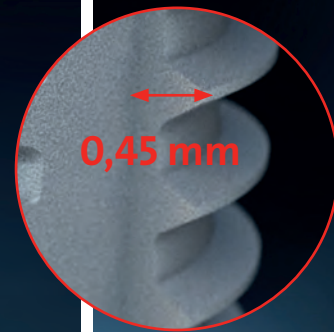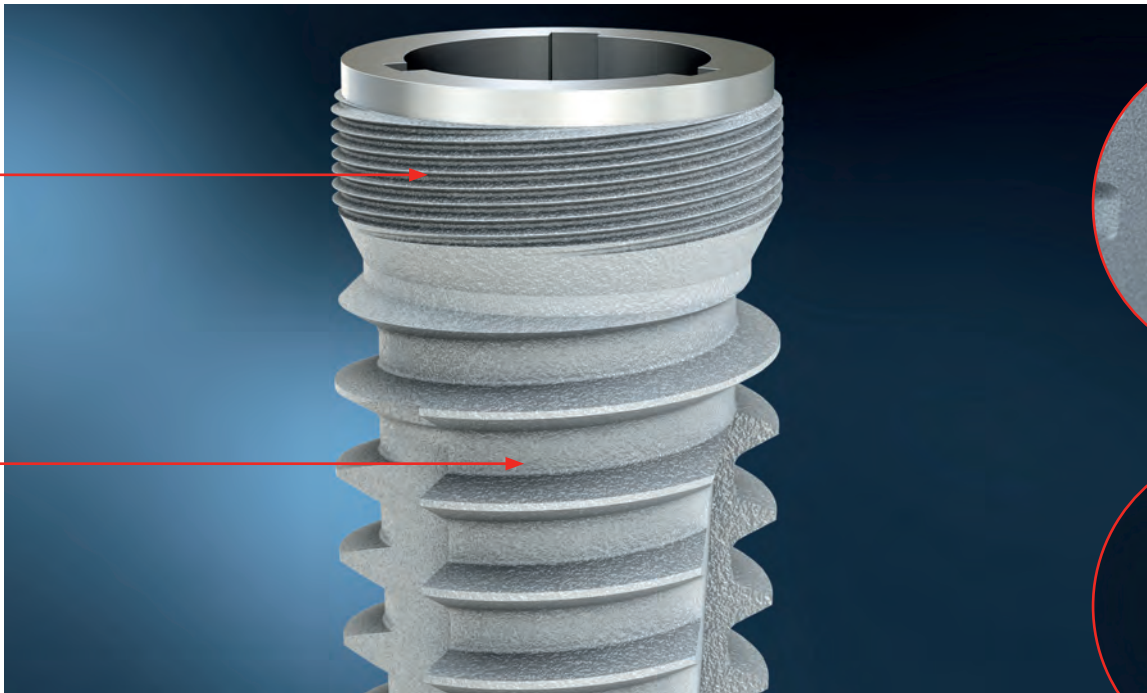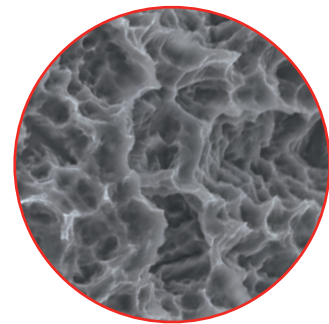

HIGH-PROFILE MAKROGEWINDE

Hohe Primärstabilität durch das High-Profile-Makrogewinde. Auch beim Zurückdrehen während der Insertion. Das bedeutet mehr Flexibilität bei der Positionierung des Implantats. Kurze Eindrehzeit durch Gewindesteigung 0,9 mm pro Umdrehung.

PRIMÄRSTABIL
KNOCHENERHALTEND*
KOMPATIBEL ZUR TUBE-IN-TUBE® IMPLANTAT
ABUTMENTVERBINDUNG VON CAMLOG**



OBERFLÄCHE

Hochreine, korundgestrahlte und säuregeätzte Oberfläche bis zum 0,4 mm maschinerten Implantatthals. Die dimensionierte Mikro-Makro-Rauigkeit eignet sich hervorragend für die Anlagerung knochenbildender Zellen und fördert damit zuverlässig eine langfristige Osseointegration.

IMPLANTATANSCHLUSS

Der Implantatanschluss ist kompatibel zur Tube-in-Tube® Implantat-Abutment-Verbindung von Camlog***.

Mit den Produkten unserer C-Serie wird die optimale Versorgung der Camlog*** und PROCONE-Implantate ermöglicht.

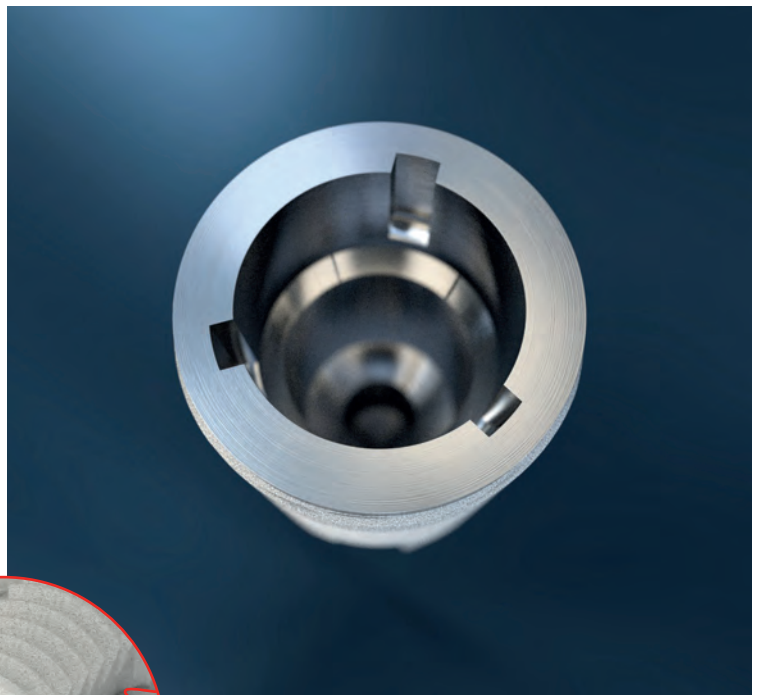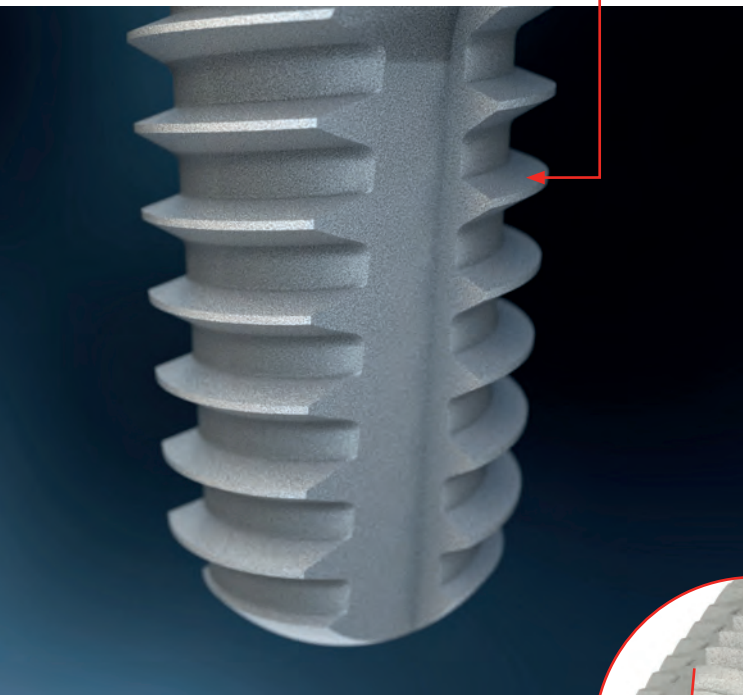

3 SCHNEIDEKANTEN

Die 3 Schneidekanten ermöglichen ein schnelles und einfaches Eindrehen des Implantats.



* Beruhend auf dem Prinzip des krestalen Knochenerhalts durch Mikrogewinde.

** Camlog-Produkte werden von der Camlog Biotechnologies AG angeboten, die in keiner rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehung zu Medentika® steht.

Chirurgie-Tray

1 2 3



Nadelbohrer 0-14-77 Pilotbohrer C 14-2000 Vorbohrer C 14-2800

4 5 6 7




Formbohrer C 14-3309 C 14-3809 C 14-4309 C 14-5009

8



Parallelisierungshilfe C 13-2028

9 10 11 12

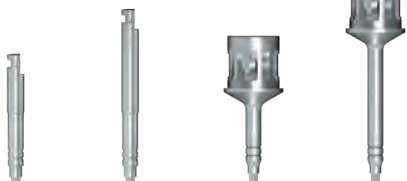


M 09-1 Eindreheinstrument M 03-1 M 11-1 M 10-1

24 25 26




Eindreheinstrument Implantat C 13-2 C 13-3 C 13-1

27 28 29

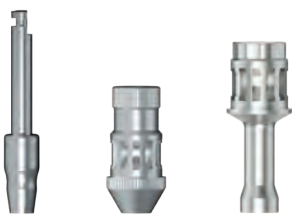

Verlängerung ISO-Schaft 0-13-55 Adapter ISO-Schaft M 14 Eindreheinstrument Multi-unit 0-13-76

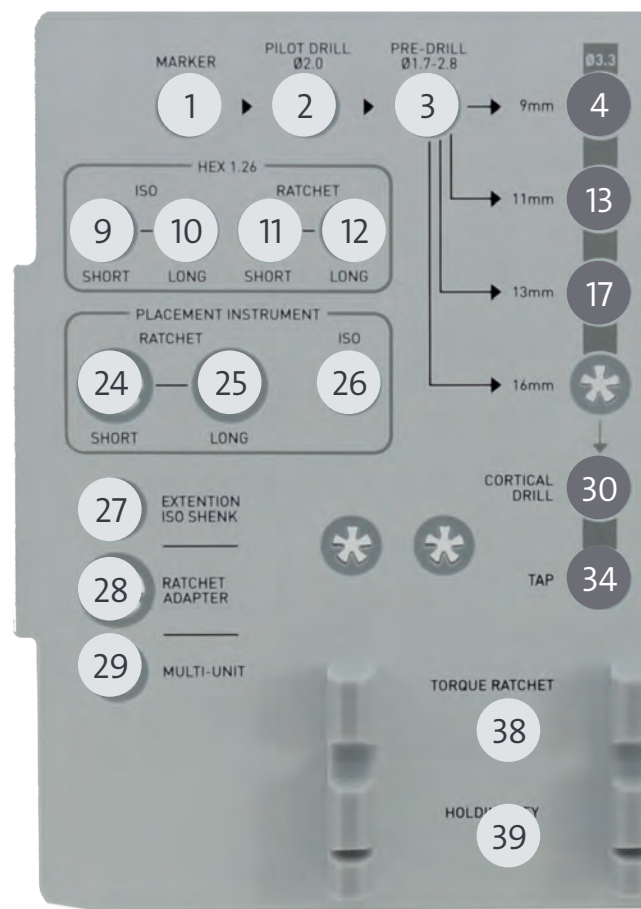

38



Drehmomentratsche 6-13-05

39



Gegenhalteschlüssel C 13-10

13 14 15 16




Formbohrer
C 14-3311 C 14-3811 C 14-4311 C 14-5011

17 18 19 20



Formbohrer
C 14-3313 C 14-3813 C 14-4313 C 14-5013

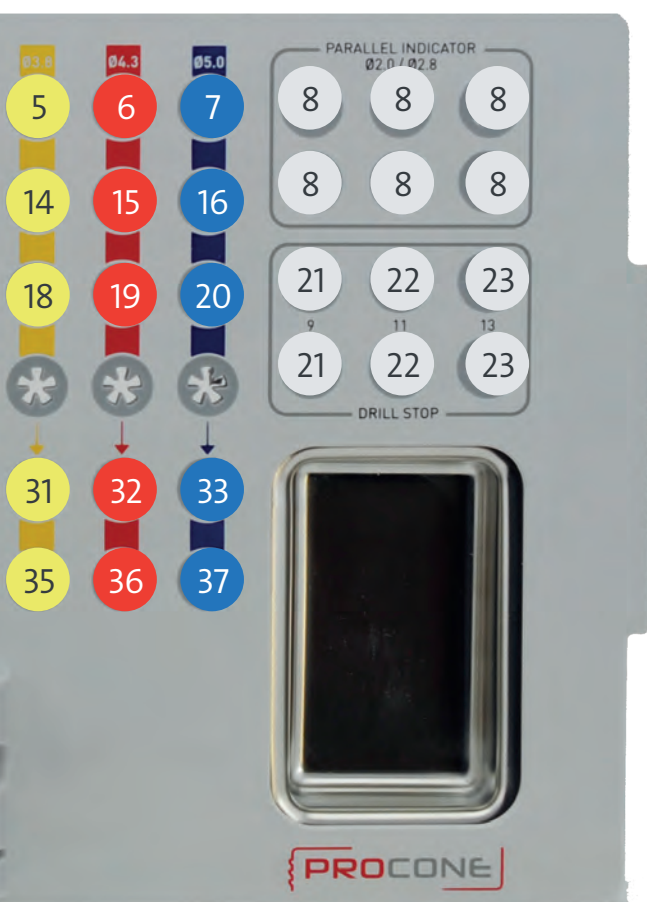

30 31 32 33



Kortikalisbohrer
C 14-3316 C 14-3816 C 14-4316 C 14-5016

34 35 36 37



Gewindeschneider
C 05-3309 C 05-3809 C 05-4309 C 05-5009

21 22 23



Bohrstopp Pilot-/Vorbohrer
C 14-09 C 14-11 C 14-13




Bohrstopp Formbohrer
C 14-3300 C 14-3800 C 14-4300 C 14-5000

Bohrer


Die aufeinander abgestimmten Bohrer ermöglichen den Durchmesser des Implantatlagers individuell auf die Knochenqualität abzustimmen. Die Knochenpräparation sollte den individuellen Knochenqualitäten entsprechend durch optimale Bohrersequenzen optional angepasst werden.

Beispielhaft für alle Implantatdurchmesser und Längen

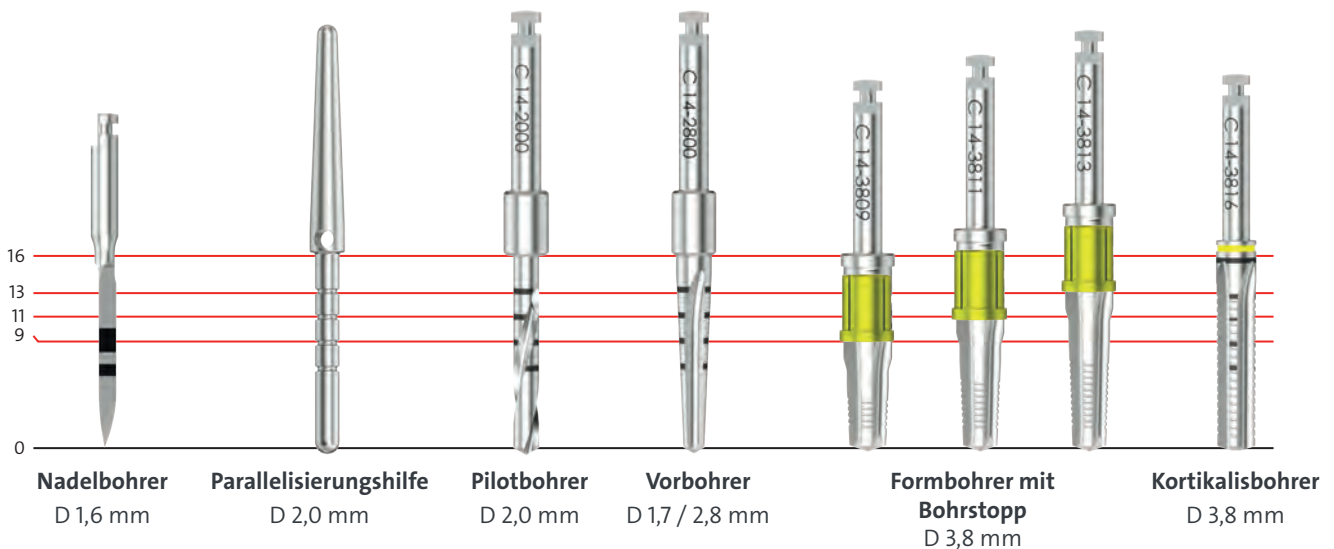

Für jede Implantatgröße stehen durchmesser- und längenabhängige Bohrer zu Verfügung. Die benötigte Durchmessererweiterung erfolgt in aufsteigender Reihenfolge.

Für die Formbohrer gibt es zusätzlich zum Durchmesser passende Bohrstopps, die als Tiefenstopp dienen. Hierbei bleibt die Implantatschulter 0,4 mm oberhalb des Knochenniveaus. Falls eine tiefere Implantierung gewünscht ist, kann der Tiefenstopp entfernt werden. Die schwarzen Lasermarkierungen dienen dann zur Tiefenkontrolle. Die Abstände der Markierungen betragen 1,0 mm und sind jeweils 0,4 mm breit.

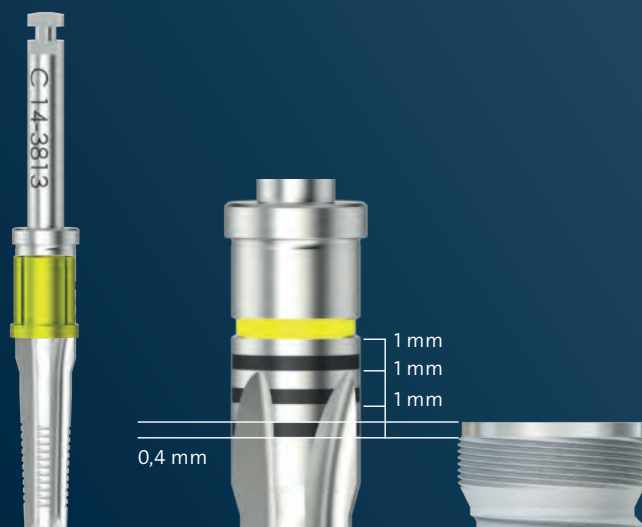

Formbohrer

Beispiel
Länge 9 mm

HINWEIS:

Bei den Formbohrern entsteht durch die Bohrspitze eine Überlänge bis zu 0,6 mm.



Durchmesser D 3,3 mm
Drehzahl U/min. 550



D 3,8 mm
500



D 4,3 mm
400



D 5,0 mm
350

Kortikalisbohrer

Der Kortikalisbohrer wird bei kompakter Kortikalis (D1) für die zirkuläre apikale Aufweitung des Implantatbetts verwendet. Die Lasermarkierungen korrespondieren zur jeweiligen Implantatlänge. Zusätzlich dient die plane Bohrspitze als Tiefenstopp.



Durchmesser D 3,3 mm
Drehzahl U/min. 550



D 3,8 mm
500



D 4,3 mm
400



D 5,0 mm
350

Gewindeschneider

Bei Knochenqualität D1/D2 wird empfohlen, den Gewindeschneider des passenden Durchmessers zu verwenden. Der Gewindeschneider wird bis max. Oberkante des schneidenden Anteils eingedreht.

Bitte beachten Sie, dass alle Gewindeschneider mit dem **ISO-Adapter** immer von Hand eingedreht werden müssen.



D 3,3 mm



D 3,8 mm



D 4,3 mm



D 5,0 mm

Bohrprotokoll


Ankörung mit Nadelbohrer	Pilotbohrung	Vorbohrung	Implantatdurchmesser	Formbohrung				Kortikalisbohrung für Knochenqualität D1	Gewindeschneider für Knochenqualität D1/D2
	 2,0mm* 300 - 600 U/min	 2,8mm*	 D 3.3 mm	 3,3mm* 550U/min				 3,3mm* 550U/min	 3,3mm* von Hand
			 D 3.8 mm	 3,3mm* 550U/min	 3,8mm* 500U/min			 3,8mm* 500U/min	 3,8mm* von Hand
			 D 4.3 mm	 3,3mm* 550U/min	 3,8mm* 500U/min	 4,3mm* 400U/min		 4,3mm* 400U/min	 4,3mm* von Hand
			 D 5.0 mm	 3,3mm* 550U/min	 3,8mm* 500U/min	 4,3mm* 400U/min	 5,0mm* 350U/min	 5,0mm* 350U/min	 5,0mm* von Hand

*Bohrerdurchmesser

Implantatbettaufbereitung


Beispielhaft für PROCONE D 3.8 x L 13 mm

Markierungsbohrung mit dem Nadelbohrer Ø 1,6 mm

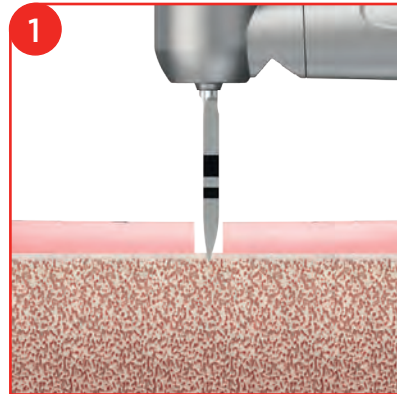


Die Markierungsbohrung erfolgt nach Mobilisation des Mucoperiostlappens mit dem Nadelbohrer.

Tiefenbohrung mit dem Pilotbohrer

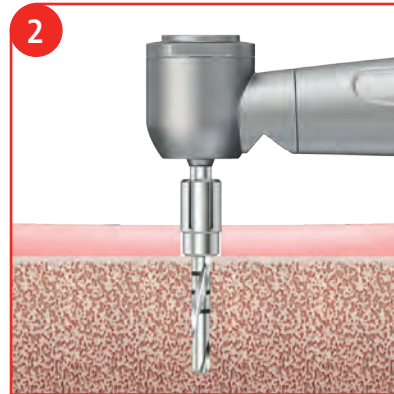

Die abzuschließende Tiefenbohrung erfolgt immer direkt mit dem Pilotbohrer D 2,0 mm. Zur Tiefenkontrolle dienen wiederum die zur jeweiligen Implantatlänge korrespondierenden Lasermarkierungen oder die im Tray befindlichen Bohrstopps. Die maximale Drehzahl beträgt 600 U / min. Mit der Parallelisierungshilfe kann die Bohrtiefe des Pilotbohrers geprüft werden.


Vorbohrung mit dem Vorbohrer

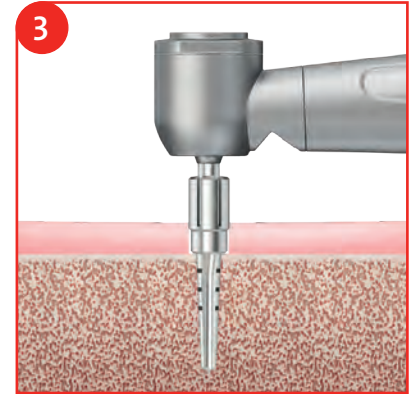

Die Vorbohrung erfolgt mit dem Vorbohrer D 1,7 / 2,8 mm. Zur Tiefenkontrolle dienen wiederum die zur jeweiligen Implantatlänge korrespondierenden Lasermarkierungen oder die im Tray befindlichen Bohrstopps. Die maximale Drehzahl beträgt 600 U / min.


Bei jedem Bohrvorgang muss auf ausreichende Kühlung, z.B. mit NaCl-Lösung, geachtet werden, um eine Überhitzung und damit eine Schädigung des Knochens zu vermeiden.

Formbohrung mit dem Formbohrer

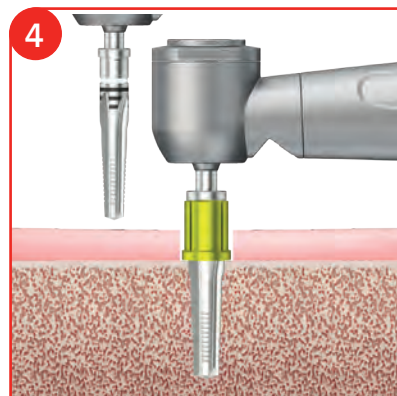


Nach Abschluss der Vorbohrung beginnt die Formbohrung mit dem Formbohrer D 3,3 mm und wird mit dem Formbohrer D 3,8 mm abgeschlossen. Zur Tiefenkontrolle dient der aufgesteckte Bohrstopp. Die maximale Drehzahl beträgt 550 U / min.

Tiefenbohrung mit dem Kortikalisbohrer

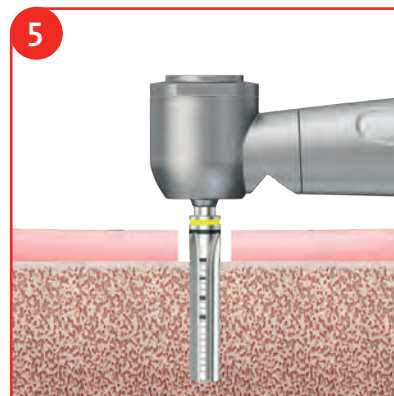

Mit dem Kortikalisbohrer wird bei kompakter Kortikalis (D1) abschließend eine zirkuläre apikale Aufweitung des Implantatbetts erfolgen. Die Lasermarkierungen korrespondierenden zur jeweiligen Implantatlänge. Zusätzlich dient die plane Bohrspitze als Tiefenstopp. Die maximale Drehzahl beträgt 550 U / min.

Gewindeschneider

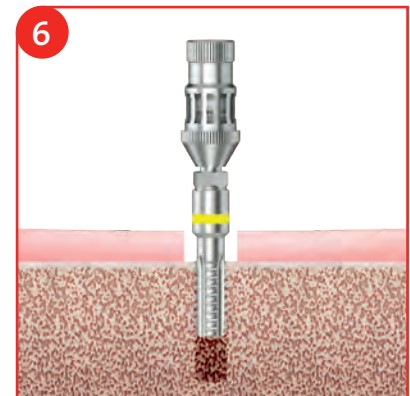


Bei Knochenqualität D1 / D2 wird empfohlen, den Gewindeschneider des passenden Durchmessers zu verwenden. Der Gewindeschneider wird bis max. Oberkante des schneidenden Anteils eingedreht. Bitte beachten Sie, dass alle Gewindeschneider immer von Hand eingedreht werden müssen.

Die neue Implantatverpackung

Die neue Implantatverpackung für das PROCONE System wurde entwickelt, um die Handhabung noch einfacher zu machen. Die kompakte Implantatverpackung macht die Lagerung effizienter. Wichtige Kennzahlen, wie Artikelnummer, Durchmesser, Länge, Implantatverbindung und Typ, sind deutlich zu erkennen.



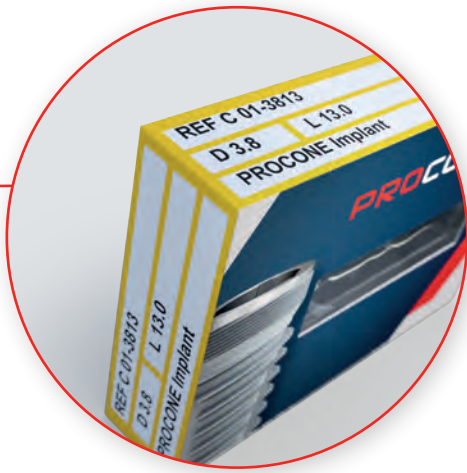


- Übersichtliche, reduzierte Infoetiketten mit den wesentlichen Angaben unterstützen das einfache Unterscheiden der Implantate. Die Implantatdurchmesser sind durch die jeweilige Farbcodierung der Infoetiketten schnell und sicher auf einen Blick erkennbar.
- Das doppelt und über Eck angebrachte Infoetikett ermöglicht die flexible Lagerung der Implantate, wichtige Produktinformationen bleiben auf einen Blick sichtbar.



- Klare Erkennbarkeit der Implantate durch das Sichtfenster.



- Die Perforierung an der Umverpackung aus umweltfreundlichem Karton erleichtert den Zugang zur Sterilverpackung.

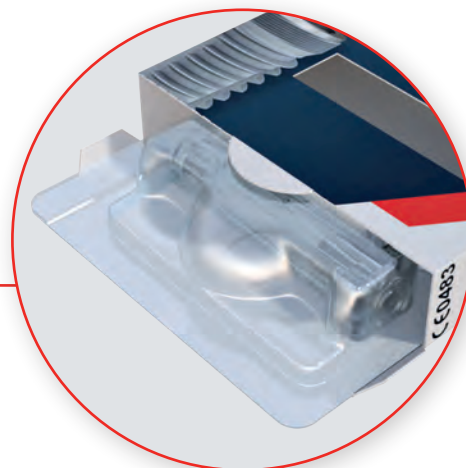

- Das Implantat wird in einem sterilen Container, geschützt durch einen Blister mit Umverpackung, geliefert. Dabei dient der Blister als Sterilbarriere.

Implantatentnahme



Entnehmen Sie den Blister aus der Umverpackung.




Entfernen Sie die Tyvek-Folie der Blisterverpackung, um den Container mit dem Implantat freizulegen.
(Achtung: Damit entfernen Sie die Sterilbarriere.)




Halten Sie den Container aufrecht und schieben Sie den Deckel herunter.




Fixieren Sie das Implantat durch leichten Druck auf die Seiten des Containers.

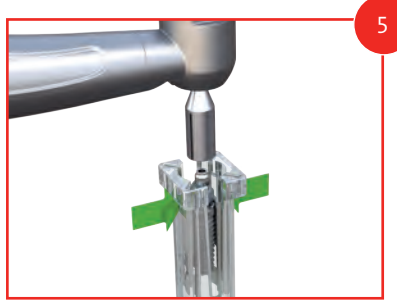

Drehen Sie das Eindrehinstrument langsam im Uhrzeigersinn, während Sie es auf den Einbringpfosten setzen, bis es auf diesen gleitet.

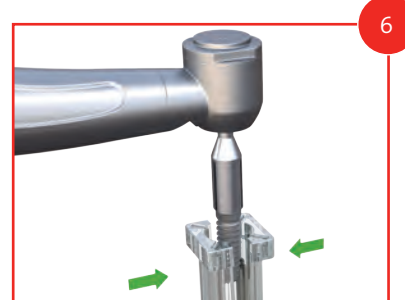

Lösen Sie den seitlichen Druck auf den Container und entnehmen Sie das Implantat.

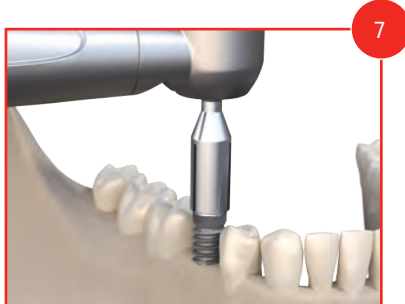

Inserieren Sie das Implantat in das präparierte Implantatbett.



Die mitgelieferte Verschlusschraube ist in die Unterseite des Containers geschraubt.



Zum Herausschrauben der Verschlusschraube verwenden Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26.




Drehen Sie die Verschlusschraube handfest (5-10 Ncm) in das Implantat.



Implantatinsertion

Beispielhaft für PROCONE D 3.8 x L 13 mm


Einsetzen des Implantats mit dem Winkelstück

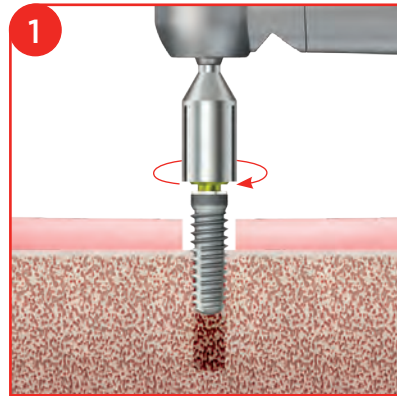

Wird das Implantat mit dem Eindreheinstrument für das Winkelstück eingesetzt, dürfen 25 U / min. und 35 Ncm Drehmoment nicht überschritten werden.


Falls diese 35 Ncm doch überschritten werden müssen, um die Implantat-Endposition zu erreichen, schrauben Sie das Implantat vorsichtig heraus und vergrößern Sie das Implantatbett mit dem Kortikalisbohrer.

Endpositionierung mit der Ratsche

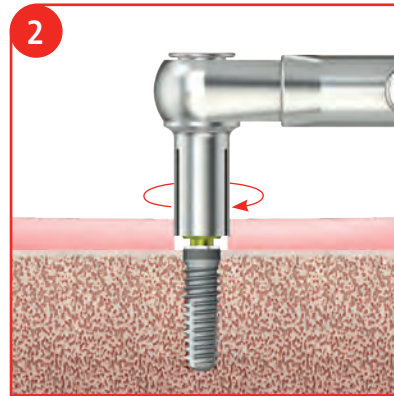


Wird das Implantat mit der Ratsche und dem manuellen Eindreheinstrument inseriert, sollte die Ratsche mit einem Drehmoment von 35 Ncm eingestellt und dieses Drehmoment idealerweise nicht überschritten werden. Sollte das Drehmoment, z.B. aufgrund der Knochenqualität, höher sein, empfehlen wir das Implantat vorsichtig herauszuschrauben und das Implantatbett mit dem Kortikalisbohrer zu erweitern.

Entfernen des Eindreheinstruments

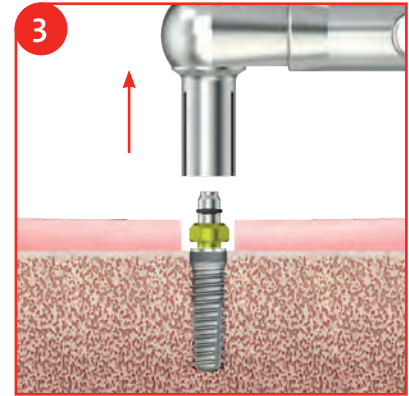


Nach Erreichen der Endposition des Implantats wird das Eindreheinstrument vorsichtig abgezogen.

Entfernen des Einbringpfostens

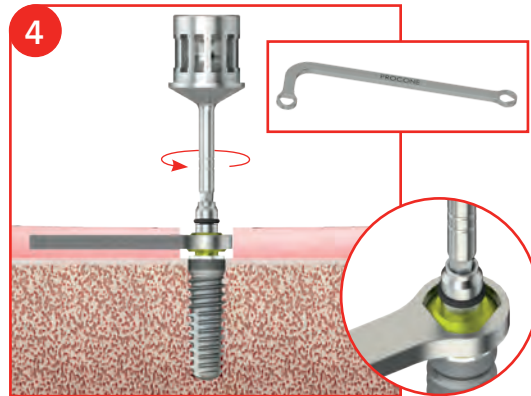

Mit dem Gegenhalteschlüssel wird der Einbringpfosten beim Lösen der Schraube fixiert. So wird ein ungewolltes Herausdrehen des Implantats, bei sehr weichem Knochen oder zu fest angezogener Schraube, vermieden.

Gedekte oder transgingivale Einheilung

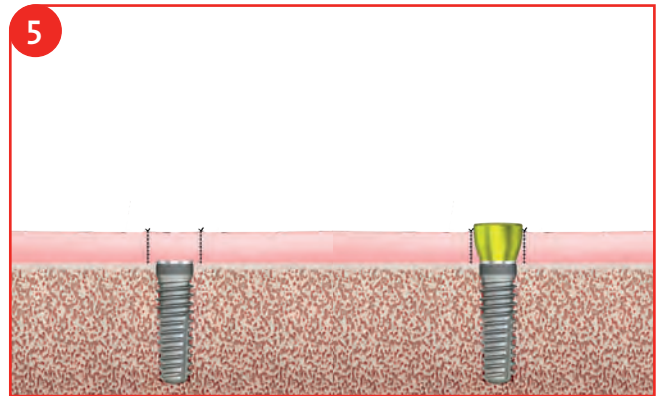

Ist das Implantat für eine gedekte Einheilung vorgesehen, muss nach Entfernung des Einbringpfostens die Verschlusschraube montiert werden.

Ist das Implantat für eine transgingivale Einheilung vorgesehen, muss nach Entfernung des Einbringpfostens ein Gingivaformer entsprechend der Stärke des Weichgewebes montiert werden.

BITTE BEACHTEN:

Im Falle einer temporären Versorgung mit einer Teil- oder Vollprothese ist darauf zu achten, dass kein Kontakt zwischen Gingivaformer oder Provisorium vorhanden ist.

PROCONE Implantat

D 3.3 mm

- D 3,3
- Titan Grade 4
- steril verpackt
- inkl. Verschlusschraube
- inkl. Einbringpfosten

Länge	11 mm	13 mm
Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3
Artikel-Nr.	C 01-3311	C 01-3313
	118,00 EUR	118,00 EUR



PROCONE Implantat

D 3.8 mm

- D 3,8
- Titan Grade 4
- steril verpackt
- inkl. Verschlusschraube
- inkl. Einbringpfosten

Länge	9 mm	11 mm	13 mm
Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Artikel-Nr.	C 01-3809	C 01-3811	C 01-3813
	118,00 EUR	118,00 EUR	118,00 EUR



PROCONE Implantat

D 4.3 mm

- D 4,3
- Titan Grade 4
- steril verpackt
- inkl. Verschlusschraube
- inkl. Einbringpfosten

Länge	9 mm	11 mm	13 mm
Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Artikel-Nr.	C 01-4309	C 01-4311	C 01-4313
	118,00 EUR	118,00 EUR	118,00 EUR



PROCONE Implantat

D 5.0 mm

- D 5,0
- Titan Grade 4
- steril verpackt
- inkl. Verschlusschraube
- inkl. Einbringpfosten

Länge	9 mm	11 mm	13 mm
Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Artikel-Nr.	C 01-5009	C 01-5011	C 01-5013
	118,00 EUR	118,00 EUR	118,00 EUR



Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt



Implantatanschluss	D 3,3	D 3,3	D 3,3
Gingivahöhe	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
Durchmesser	D 4,2	D 4,5	D 4,5
Artikel-Nr.	C 70-2	C 70-4	C 70-6
	24,00 EUR	24,00 EUR	24,00 EUR

Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt



Implantatanschluss	D 3,8	D 3,8	D 3,8
Gingivahöhe	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
Durchmesser	D 5,0	D 5,3	D 5,3
Artikel-Nr.	C 71-2	C 71-4	C 71-6
	24,00 EUR	24,00 EUR	24,00 EUR

Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt



Implantatanschluss	D 4,3	D 4,3	D 4,3
Gingivahöhe	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
Durchmesser	D 5,5	D 5,8	D 5,8
Artikel-Nr.	C 72-2	C 72-4	C 72-6
	24,00 EUR	24,00 EUR	24,00 EUR

Gingivaformer

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt



Implantatanschluss	D 5,0	D 5,0	D 5,0
Gingivahöhe	2,0 mm	4,0 mm	6,0 mm
Durchmesser	D 6,2	D 6,5	D 6,5
Artikel-Nr.	C 73-2	C 73-4	C 73-6
	24,00 EUR	24,00 EUR	24,00 EUR

Nadelbohrer

- Edelstahl



Typ	Nadelbohrer
Artikel-Nr.	0-14-77
	21,00 EUR

Rosenbohrer

- Edelstahl



Typ	Rosenbohrer
Durchmesser	2,3 mm
Artikel-Nr.	0-14-75
	10,00 EUR

Bohrer für PROCONE Implantat

- Edelstahl



Typ	Pilotbohrer	Vorbohrer
Durchmesser	2,0 mm	1,7-2,8 mm
Artikel-Nr.	C 14-2000	C 14-2800
	45,00 EUR	45,00 EUR

Bohrer für PROCONE Implantat D 3,3

- Edelstahl



Typ	Formbohrer	Formbohrer	Formbohrer	Kortikalisbohrer
Durchmesser	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Länge	9 mm	11 mm	13 mm	
Artikel-Nr.	C 14-3309	C 14-3311	C 14-3313	C 14-3316
	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR

Bohrer für PROCONE Implantat D 3,8

• Edelstahl



Typ	Form-bohrer	Form-bohrer	Form-bohrer	Kortikalis-bohrer
Durchmesser	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,8 mm
Länge	9 mm	11 mm	13 mm	
Artikel-Nr.	C 14-3809	C 14-3811	C 14-3813	C 14-3816
	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR

Bohrer für PROCONE Implantat D 4,3

• Edelstahl



Typ	Form-bohrer	Form-bohrer	Form-bohrer	Kortikalis-bohrer
Durchmesser	4,3 mm	4,3 mm	4,3 mm	4,3 mm
Länge	9 mm	11 mm	13 mm	
Artikel-Nr.	C 14-4309	C 14-4311	C 14-4313	C 14-4316
	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR

Bohrer für PROCONE Implantat D 5,0

• Edelstahl



Typ	Form-bohrer	Form-bohrer	Form-bohrer	Kortikalis-bohrer
Durchmesser	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm	5,0 mm
Länge	9 mm	11 mm	13 mm	
Artikel-Nr.	C 14-5009	C 14-5011	C 14-5013	C 14-5016
	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR

Gewindeschneider PROCONE Implantat

• Edelstahl



für PROCONE Implantat	D 3,3	D 3,8	D 4,3	D 5,0
Artikel-Nr.	C 05-3309	C 05-3809	C 05-4309	C 05-5009
	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR	45,00 EUR

Bohrstopp Pilot-/ Vorböhrer

- Titan Grade 5 KV



Implantatlänge	L 9	L 11	L 13
Artikel-Nr.	C 14-0009	C 14-0011	C 14-0013
	EUR	EUR	EUR

Bohrstopp Formbohrer

- Titan Grade 5 KV



Durchmesser	3,3 mm	3,8 mm	4,3 mm	5,0 mm
Farbcode	grau beschichtet	gelb beschichtet	rot beschichtet	blau beschichtet
Artikel-Nr.	C 14-3300	C 14-3800	C 14-4300	C 14-5000
	15,00 EUR	15,00 EUR	15,00 EUR	15,00 EUR

Eindreheinstrument Implantat

- Hand und Ratsche
- Edelstahl



Typ	Procone	Procone
Ausführung	kurz	lang
Artikel-Nr.	C 13-2	C 13-3
	38,00 EUR	38,00 EUR

Eindreheinstrument Implantat

- Winkelstück
- Edelstahl



Typ	Procone
Ausführung	lang
Artikel-Nr.	C 13-1
	32,00 EUR

Eindreheinstrument Implantat

- Camlog Ratsche
- Edelstahl



Typ	Procone	Procone
Ausführung	kurz	lang
Artikel-Nr.	C 13-6	C 13-7
	38,00 EUR	38,00 EUR

Eindreheinstrument Hex 1,26

- Hand und Ratsche
- gehärteter Edelstahl



Typ	kurz	lang
Artikel-Nr.	M 11-1	M 10-1
	34,00 EUR	34,00 EUR

Eindreheinstrument Hex 1,26

- Winkelstück
- gehärteter Edelstahl



Typ	kurz	lang
Artikel-Nr.	M 09-1	M 03-1
	18,00 EUR	18,00 EUR

Verlängerung ISO-Schaft

- Winkelstück
- Edelstahl



Artikel-Nr.	0-13-55
	34,00 EUR

Parallelisierungshilfe

- Titan Grade 5 KV



Typ	
Durchmesser (mm)	2,0/1,7-2,8
Ausführung	mit Tiefenmarkierung
Artikel-Nr.	C 13-2028
	EUR

Chirurgie Tray

- Ausführung: ohne Inhalt



Ausführung	ohne Inhalt
Artikel-Nr.	C 13-8
	EUR

Chirurgie Tray Procone



Ausführung

bestückt

Artikel-Nr.

C 13-9

EUR

Chirurgie Tray

Nr.	Artikel Beschreibung				Anzahl
C 05-3309	Gewindeschneider	Procone Implantat	1 Stk.	C 05-3809	1 Stk.
C 05-3809	Gewindeschneider	Procone Implantat			1 Stk.
C 05-4309	Gewindeschneider	Procone Implantat			1 Stk.
C 05-5009	Gewindeschneider	Procone Implantat			1 Stk.
C 13-1	Eindrehinstrument	Implantat			1 Stk.
C 13-2	Eindrehinstrument	Implantat			1 Stk.
C 13-3	Eindrehinstrument	Implantat			1 Stk.
C 14-2000	Pilotbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-0009	Bohrstopp	Pilot-/Vorbohrer			2 Stk.
C 14-0011	Bohrstopp	Pilot-/Vorbohrer			2 Stk.
C 14-0013	Bohrstopp	Pilot-/Vorbohrer			2 Stk.
C 14-2800	Vorbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3300	Bohrstopp	Formbohrer			3 Stk.
C 14-3309	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3311	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3313	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3316	Kortikalisbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3800	Bohrstopp	Formbohrer			3 Stk.
C 14-3809	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3811	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3813	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-3816	Kortikalisbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-4300	Bohrstopp	Formbohrer			3 Stk.
C 14-4309	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-4311	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-4313	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-4316	Kortikalisbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-5000	Bohrstopp	Formbohrer			3 Stk.
C 14-5009	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-5011	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-5013	Formbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
C 14-5016	Kortikalisbohrer	Procone Implantat			1 Stk.
O-14-77	Nadelbohrer				1 Stk.
M 03-1	Eindrehinstrument	Hex 1,26			1 Stk.
M 09-1	Eindrehinstrument	Hex 1,26			1 Stk.
M 10-1	Eindrehinstrument	Hex 1,26			1 Stk.
M 11-1	Eindrehinstrument	Hex 1,26			1 Stk.
M 12	Drehmomentratsche	mit Drehmomenteinstellung			1 Stk.
C 13-10	Gegenhalteschlüssel				1 Stk.
C 13-2028	Parallelisierungshilfe	Procone			4 Stk.
C 13-8	Chirurgie Tray	ohne Inhalt			1 Stk.
M 14	Adapter ISO-Schaft	Ratsche M 12			1 Stk.
O-13-55	Verlängerung ISO-Schaft				1 Stk.

Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	C 10	C 20	C 11	C 21
	38,00 EUR	38,00 EUR	38,00 EUR	38,00 EUR


Abformpfosten offener Löffel

- inkl. Halteschraube
- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Ausführung	kurz	lang	kurz	lang
Artikel-Nr.	C 12	C 22	C 13	C 23
	38,00 EUR	38,00 EUR	38,00 EUR	38,00 EUR

Abformpfosten geschlossener Löffel

- inkl. Abutmentschraube
- inkl. Positionierkappe
- Titan Grade 5 KV

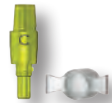				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Artikel-Nr.	C 30	C 31	C 32	C 33
	38,00 EUR	38,00 EUR	38,00 EUR	38,00 EUR

Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Typ		CADCAM		CADCAM
Einsetzinstrument		C 80 T		C 81 T
Artikel-Nr.	C 50	C 80	C 51	C 81
	13,00 EUR	16,00 EUR	13,00 EUR	16,00 EUR

Laborimplantat

• Titan Grade 5 KV

				
				
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Typ	CAD/CAM		CAD/CAM	
Einsetzinstrument	C 82 T		C 83 T	
Artikel-Nr.	C 52	C 82	C 53	C 83
	13,00 EUR	16,00 EUR	13,00 EUR	16,00 EUR

Einsetzinstrument Laborimplantat CAD/CAM

• Edelstahl

				
				
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 6.0
Artikel-Nr.	C 80 T	C 81 T	C 82 T	C 83 T
	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

					
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 60	C 61	C 62	C 64	C 65
	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.				

Abutmentschraube

• Titan Grade 5 KV

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx
Artikel-Nr.	C 67	C 68
	12,00 EUR	12,00 EUR
Bitte beachten:	Die richtige Auswahl der Abutmentschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.	

Laborschraube

- rot beschichtet



Artikel-Nr.	C 61 L	C 62 L
	3,80 EUR	3,80 EUR
Bitte beachten: Die richtige Auswahl der Laborschraube entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abutment im Katalog.		

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	4.2 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	C 100-1	C 100-3	C 110-1	C 110-3
	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR

Standardabutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	5.5 mm	5.8 mm	6.2 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 120-1	C 120-3	C 130-1	C 130-3
	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	4.8 mm	4.5 mm	5.0 mm	5.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr. Typ 1	C 200-1-1	C 200-1-3	C 210-1-1	C 210-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	C 200-2-1	C 200-2-3	C 210-2-1	C 210-2-3
	78,00 EUR	78,00 EUR	78,00 EUR	78,00 EUR

Standardabutment abgewinkelt 18°

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm	1.0/1.8 mm	3.0/4.5 mm
Durchmesser	5.5 mm	5.8 mm	6.2 mm	6.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr. Typ 1	C 220-1-1	C 220-1-3	C 230-1-1	C 230-1-3
Artikel-Nr. Typ 2	C 220-2-1	C 220-2-3	C 230-2-1	C 230-2-3
	78,00 EUR	78,00 EUR	78,00 EUR	78,00 EUR

HSL Abutment

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Goldgewicht (g)	0,40	0,52	0,73	0,89
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 300	C 310	C 320	C 330
	108,00 EUR	108,00 EUR	118,00 EUR	118,00 EUR

HSL Abutment rotierend

- Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Goldgewicht (g)	0,28	0,38	0,48	0,59
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 300 R	C 310 R	C 320 R	C 330 R
	108,00 EUR	108,00 EUR	118,00 EUR	118,00 EUR

CoCr Abutment

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 700	C 710	C 720	C 730
	54,00 EUR	54,00 EUR	54,00 EUR	54,00 EUR

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.

CoCr Abutment rotierend

- CoCr Legierung / WAK 14,1
- angussfähig
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 700 R	C 710 R	C 720 R	C 730 R
	54,00 EUR	54,00 EUR	54,00 EUR	54,00 EUR

Bitte beachten: Das CoCr Abutment kann mit NEM Legierungen angegossen werden, deren Liquidustemperatur nicht über 1420°C liegt.


Scanbody

- Titan
- spezialbeschichtet
- inkl. Halteschraube

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 6.0
Halteschraube	C 61 SB	C 61 SB	C 61 SB	C 62 SB
Artikel-Nr.	C 1400	C 1410	C 1420	C 1430
	39,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR	39,00 EUR
Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.				

Titanbasis ASC Flex

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

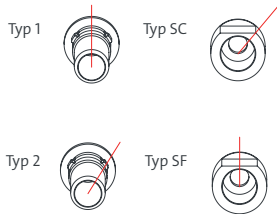

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr. Typ 1	C 1600-1-SC	C 1610-1-SC	C 1620-1-SC	C 1630-1-SC
Artikel-Nr. Typ 2	C 1600-2-SF	C 1610-2-SF	C 1620-2-SF	C 1630-2-SF
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR
Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.				


Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

				
				
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-07	6-09-31
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-08	6-09-32
	19,00 EUR	19,00 EUR	19,00 EUR	19,00 EUR

Titanbasis ASC Flex

- Platform-Switch
- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Typ SC = Schraubenkanal winkelt über die rechte Ecke des Scanbody ab
- Typ SF = Schraubenkanal winkelt über die Fläche des Scanbody ab
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

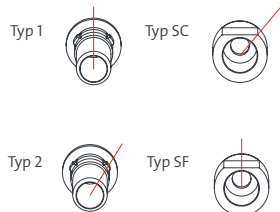

			
	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.8-PS	D 4.3-PS	D 5.0-PS
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr. Typ 1	C 1610P-1-SC	C 1620P-1-SC	C 1630P-1-SC
Artikel-Nr. Typ 2	C 1610P-2-SF	C 1620P-2-SF	C 1630P-2-SF
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06. Zur Auswahl der gewünschten Ausrichtung des abgewinkelten Schraubenkanals, bitte die Gebrauchsanweisung beachten.

Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

			
			
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-27
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-28
	19,00 EUR	19,00 EUR	19,00 EUR

Titanbasis ASC Flex rotierend

- abgewinkelter Schraubenkanal
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Kaminhöhe	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5	3.5-6.5
Gingivahöhe	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 68
Artikel-Nr.	C 1800	C 1810	C 1820	C 1830
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Titanbasis ASC Flex benötigen Sie das Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8, M 10-8 oder 6-13-06.


Modellierkappen Set

- Kunststoff ausbrennbar
- Lieferumfang: vier Kaminhöhen

				
				
Modellierkappen Set gerade	6-09-01	6-09-01	6-09-07	6-09-31
Modellierkappen Set abgewinkelt	6-09-02	6-09-02	6-09-08	6-09-32
	19,00 EUR	19,00 EUR	19,00 EUR	19,00 EUR

Titanbasis 2. Generation


- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

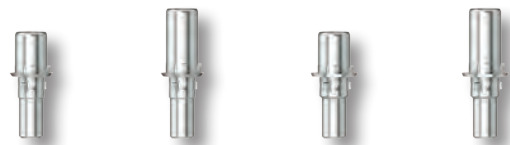

	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	C 1000	C 1100	C 1010	C 1110
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR

Titanbasis 2. Generation

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

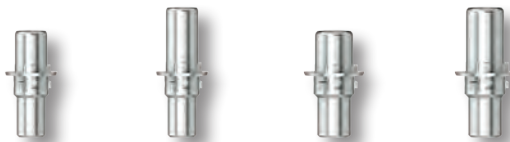

	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Kaminhöhe	3.5 mm	5.5 mm	3.5 mm	5.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 1020	C 1120	C 1030	C 1130
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR

Titanbasis Brücken/Stege 2. Generation

- rotierend
- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3
Kaminhöhe	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Gingivahöhe	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Abutment	C 60	C 60	C 60
Artikel-Nr.	C 1500	C 1510	C 1520
	44,00 EUR	44,00 EUR	44,00 EUR

Bitte beachten: Wird verwendet mit Scanbody.

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.8	D 3.8
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 61
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 61 L
Artikel-Nr.	C 9000-R	C 9000-16R	C 9010-R	C 9010-16R
	39,00 EUR	44,00 EUR	39,00 EUR	44,00 EUR

PreFace-Abutment Titan Grade 5 KV

- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 5.0	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	16.0 mm	11.5 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 62	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 62 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 9020-R	C 9020-16R	C 9030-R	C 9030-16R
	39,00 EUR	44,00 EUR	39,00 EUR	44,00 EUR

PreFace-Abutment CoCr Legierung

- WAK 14,1
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Durchmesser	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm	16.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 9800-16R	C 9810-16R	C 9820-16R	C 9830-16R
	48,00 EUR	48,00 EUR	48,00 EUR	48,00 EUR

TI-Forms-Abutment für M-Series

- Titan Grade 5 KV
- inkl. Abutmentschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

				
	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.8	D 4.3	D 5.0
Durchmesser	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm	11.5 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 61	C 61	C 61	C 62
Laborschraube	C 61 L	C 61 L	C 61 L	C 62 L
Artikel-Nr.	C 9000-ST	C 9010-ST	C 9020-ST	C 9030-ST
	45,90 EUR	45,90 EUR	45,90 EUR	45,90 EUR
Bitte beachten: Wird verwendet mit Straumann/M-Series.				

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	C 4000	C 4100	C 4200	C 4300	C 4400
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	C 4010	C 4110	C 4210	C 4310	C 4410
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR

MedentiBASE Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
Eindrehinstrument	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6	M 11-6
Artikel-Nr.	C 4020	C 4120	C 4220	C 4320	C 4420
	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR	49,00 EUR

MedentiBASE Brückenschraube

- Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-28-01	C 7600
	8,00 EUR	8,00 EUR

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Material Scanbody: Titan

NEU

NEU

			
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titankappe Flex	Titanbasis
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	6-28-01	C 7600	C 7600
Artikel-Nr.	6-28-02	C 4730	C 4840
	46,00 EUR	46,00 EUR	44,00 EUR

MedentiBASE Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Material Kunststoffkappe: Tecanat (PC)
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%

		
Bezeichnung	Kunststoffkappe	HSL-Kappe
Artikel-Nr.	C 4710	C 4720
	32,00 EUR	74,00 EUR

MedentiBASE Prothetikkomponenten für Passive-Fit

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Klebebasis Material: Titan Grade 5 KV
- Klebehülse inkl. Modellierschraube

				
Bezeichnung	Klebebasis	Klebehülse	Klebebasis	Klebehülse
Ausführung	kurz	kurz	lang	lang
Eindrehinstrument	Hex 1.26		Hex 1.26	
Abutmentschraube	C 7600		C 7600	
Artikel-Nr.	C 4800	C 4810	C 4820	C 4830
	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR

MedentiBASE Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube

	
Artikel-Nr.	C 4900
	39,00 EUR

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

MedentiBASE Zubehör

- Material Verschlusskappe: Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat: Titan Grade 5 KV
- Material Laborimplantat CAD/CAM: Edelstahl
- Material Eindrehinstrument: gehärteter Edelstahl

Bezeichnung					
Einsetzinstrument				M 11-6	
Artikel-Nr.	C 4610	C 4620	4630	80	M 11-6
	16,00 EUR	28,00 EUR	18,00 EUR	22,00 EUR	48,00 EUR

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

			
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	C 8000	C 8001	C 8002
	59,00 EUR	59,00 EUR	59,00 EUR

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



			
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8100	C 8101	C 8102
Artikel-Nr. Typ 2	C 8200	C 8201	C 8202
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



			
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8300	C 8301	C 8302
Artikel-Nr. Typ 2	C 8400	C 8401	C 8402
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	C 8010	C 8011	C 8012
	59,00 EUR	59,00 EUR	59,00 EUR

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8110	C 8111	C 8112
Artikel-Nr. Typ 2	C 8210	C 8211	C 8212
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8310	C 8311	C 8312
Artikel-Nr. Typ 2	C 8410	C 8411	C 8412
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR

Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	C 8020	C 8021	C 8022
	59,00 EUR	59,00 EUR	59,00 EUR

Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8120	C 8121	C 8122
Artikel-Nr. Typ 2	C 8220	C 8221	C 8222
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR



Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 64	C 64	C 64
Artikel-Nr. Typ 1	C 8320	C 8321	C 8322
Artikel-Nr. Typ 2	C 8420	C 8421	C 8422
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR



Multi-unit Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	3.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	M 11-11	M 11-11	M 11-11
Artikel-Nr.	C 8030	C 8031	C 8032
	59,00 EUR	59,00 EUR	59,00 EUR



Multi-unit Abutment abgewinkelt 17°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



			
	■	■	■
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe (mm)	1.1/2.5	2.1/3.5	3.6/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 65	C 65	C 65
Artikel-Nr. Typ 1	C 8130	C 8131	C 8132
Artikel-Nr. Typ 2	C 8230	C 8231	C 8232
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR

Multi-unit Abutment abgewinkelt 30°

- Titan Grade 5 KV
- steril verpackt
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



			
	■	■	■
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe (mm)	0.6/3.0	1.6/4.0	2.4/5.0
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Abutmentschraube	C 65	C 65	C 65
Artikel-Nr. Typ 1	C 8330	C 8331	C 8332
Artikel-Nr. Typ 2	C 8430	C 8431	C 8432
	95,00 EUR	95,00 EUR	95,00 EUR

Multi-unit Brückenschraube

- Material: Titan Grade 5 KV
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm

NEU

		
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26
Artikel-Nr.	6-31-01	C 8501
	10,00 EUR	10,00 EUR

Multi-unit Prothetikkomponenten

- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Titanbasis / Titankappe:
inkl. Brückenschraube
Material: Titan Grade 5 KV
- Modellierhülse:
ohne Brückenschraube
Material: Tecanat (PC)

NEU

NEU

				
Bezeichnung	Titanbasis ASC	Titanbasis	Titankappe Flex	Modellierhülse
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Hex 1.26	Hex 1.26	
Schraube	6-31-01	C 8501	C 8501	
Artikel-Nr.	6-31-02	C 8508	C 8519	8510
	46,00 EUR	44,00 EUR	46,00 EUR	12,50 EUR

Bitte beachten: Die Multi-unit Modellierhülse kann für die Multi-unit Titanbasis und Multi-unit Titankappe verwendet werden.

Multi-unit Prothetikkomponenten

- inkl. Brückenschraube
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm
- Material HSL-Kappe:
Au 60%; Pd 20%; Pt 19%; Ir 1%
- Material CoCr-Kappe:
CoCr Legierung / WAK 14,1



Bezeichnung	HSL-Kappe	CoCr-Kappe
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	C 8501	C 8501
Artikel-Nr.	C 8506	C 8507
	78,00 EUR	52,00 EUR

Multi-unit Schraubpatrize

- Material MedentiLOC:
Titan Grade 5 KV TiN beschichtet
- Material Novaloc:
Titan Grade 5 KV ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 15 Ncm



Bezeichnung	MedentiLOC	Novaloc
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 8517	C 8518
	58,00 EUR	58,00 EUR

Multi-unit Scanbody

- Titan spezialbeschichtet
- inkl. Brückenschraube



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26
Schraube	C 8501	C 8501
Artikel-Nr.	C 8500	C 8513
	39,00 EUR	39,00 EUR

Bitte beachten: Der Scanbody ist sterilisierbar und für intraoralen Scan geeignet.

Multi-unit Laborimplantat

- Titan Grade 5 KV



Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Artikel-Nr.	8504	8514-17	8514-30
	18,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Multi-unit Laborimplantat CAD/CAM

- Titan Grade 5 KV

			
Ausführung	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Typ		17°	30°
Einsetzinstrument	M 11-11	8515 T	8515 T
Artikel-Nr.	8509	8515-17	8515-30
	22,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR

Multi-unit Zubehör

- Material Verschlusskappe:
Titan Grade 5 KV
- Material Abformpfosten:
Titan Grade 5 KV
- Material Eindrehinstrument:
Edelstahl
- Material Einsetzinstrument
Laborimplantat:
Edelstahl

				
Bezeichnung	Verschluss- kappe	Abform- pfosten	Eindreh- instrument	Einsetz- instrument Labor- implantat
Artikel-Nr.	C 8502	C 8503	M 11-11	8515 T
	21,00 EUR	28,00 EUR	48,00 EUR	22,00 EUR

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2000	C 2100	C 2200	C 2300	C 2400
	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2010	C 2110	C 2210	C 2310	C 2410
	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm




					
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2020	C 2120	C 2220	C 2320	C 2420
	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

MedentiLOC Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

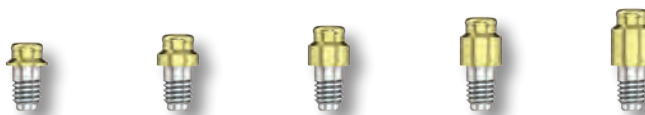

					
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26	Hex 1,26
Artikel-Nr.	C 2030	C 2130	C 2230	C 2330	C 2430
	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR	68,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden MedentiLOC Abutments benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 1,26 mm M 03-1 oder M 10-1 / M 09-1 oder M 11-1.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	PEEK
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
	68,00 EUR	68,00 EUR

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

MedentiLOC Laborimplantat

- Edelstahl



Ausführung	gerade
Artikel-Nr.	56
	19,00 EUR

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6000	C 6100	C 6200	C 6300	C 6400
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Typ 1	C 6500-1	C 6600-1	C 6700-1	C 6800-1	C 6900-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6500-2	C 6600-2	C 6700-2	C 6800-2	C 6900-2
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6010	C 6110	C 6210	C 6310	C 6410
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Typ 1	C 6510-1	C 6610-1	C 6710-1	C 6810-1	C 6910-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6510-2	C 6610-2	C 6710-2	C 6810-2	C 6910-2
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm



	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6020	C 6120	C 6220	C 6320	C 6420
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 67	C 67	C 67	C 67	C 67
Artikel-Nr. Typ 1	C 6520-1	C 6620-1	C 6720-1	C 6820-1	C 6920-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6520-2	C 6620-2	C 6720-2	C 6820-2	C 6920-2
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Eindrehinstrument	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26	Hex 1.26
Artikel-Nr.	C 6030	C 6130	C 6230	C 6330	C 6430
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Novaloc Abutment abgewinkelt 15°

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- inkl. Abutmentschraube
- Typ 1 = abgewinkelt über Fläche
- Typ 2 = abgewinkelt über Nocke
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm



					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe (mm)	1.0/2.0	2.0/3.0	3.0/4.0	4.0/5.0	5.0/6.0
Eindrehinstrument	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx	Kugel Torx
Abutmentschraube	C 68	C 68	C 68	C 68	C 68
Artikel-Nr. Typ 1	C 6530-1	C 6630-1	C 6730-1	C 6830-1	C 6930-1
Artikel-Nr. Typ 2	C 6530-2	C 6630-2	C 6730-2	C 6830-2	C 6930-2
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der abgewinkelten Novaloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument Kugel-Torx M 03-8 oder M 10-8.

Novaloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan/PEEK
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemannschette Silikon
- 2 Stück pro Packung
- inkl. Montageeinsatz



Material	Titan	PEEK
Matrizengehäuse		
Artikel-Nr.	2010.601	2010.611
	68,00 EUR	68,00 EUR

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Novaloc.

Eindrehinstrument Kugel Torx

- gehärteter Edelstahl


			
Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8
	18,00 EUR	18,00 EUR	34,00 EUR

Novaloc Laborimplantat

• Edelstahl



Ausführung	gerade	abgewinkelt
Artikel-Nr.	58	59
	19,00 EUR	19,00 EUR

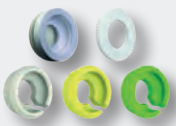Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikationen		Anzahl pro Einheit	Preis EUR
	2010.101	Novaloc Equipment Box	Inkl. 3 Werkzeuge Instrument Braun 2010.741 Instrument Blau 2010.731 Instrument Grau 2010.751 (ohne Verbrauchsmaterial)		1 Stk.	148,00
	2010.601	Novaloc Prozesspackung Titan	• Matrizengehäuse aus Titan inkl. Montageeinsatz • Retentionseinsatz weiß • Retentionseinsatz gelb • Retentionseinsatz grün • Montagemanschette Silikon		2 Stk.	68,00
	2010.611	Novaloc Prozesspackung PEEK	• Matrizengehäuse aus PEEK inkl. Montageeinsatz • Retentionseinsatz weiß • Retentionseinsatz gelb • Retentionseinsatz grün • Montagemanschette Silikon		2 Stk.	68,00
	2010.701	Novaloc Matrizengehäuse aus Titan (inkl. Montageeinsatz)	Matrize: Titan Montageeinsatz: POM		4 Stk.	64,00
	2010.702	Novaloc Matrizengehäuse aus PEEK (inkl. Montageeinsatz)	Matrize: PEEK Montageeinsatz: POM		4 Stk.	64,00
	Spezial-zubehör 2010.703	Novaloc Matrizengehäuse aus Titan mit Befestigungsoption (inkl. Montageeinsatz)	Matrize: Titan Montageeinsatz: POM		4 Stk.	64,00
	Spezial-zubehör 2010.710	Novaloc Retentionseinsatz rot	PEEK Abzugskraft:	extra-light	4 Stk.	38,00
	2010.711	Novaloc Retentionseinsatz weiß	PEEK Abzugskraft:	light	4 Stk.	38,00
	2010.712	Novaloc Retentionseinsatz gelb	PEEK Abzugskraft:	medium	4 Stk.	38,00
	2010.713	Novaloc Retentionseinsatz grün	PEEK Abzugskraft:	strong	4 Stk.	38,00
	2010.714	Novaloc Retentionseinsatz blau	PEEK Abzugskraft:	extra-strong	4 Stk.	38,00
	Spezial-zubehör 2010.715	Novaloc Retentionseinsatz schwarz	PEEK Abzugskraft:	ultra-strong	4 Stk.	38,00
	2010.721	Novaloc Modellanalog	Aluminium		4 Stk.	68,00
	2010.722	Novaloc Abform-/Fixier-Matrize	PEEK		4 Stk.	58,00
	2010.723	Novaloc Dublierplatzhalter weiß	POM		4 Stk.	34,00
	2010.724	Novaloc Montagemanschette Silikon	Silikon		10 Stk.	22,00
	2010.725	Novaloc Montageeinsatz weiß	POM		4 Stk.	36,00
	2010.731	Novaloc Aushebeinstrument für Montageteil + Modellanalog Reponier-Hilfsinstrument (blau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.	48,00
	2010.741	Novaloc Einsetz- und Aushebeinstrument für Retentionseinsätze (braun)	Aluminium, Stahl		1 Stk.	48,00
	2010.751	Novaloc Matrizengehäuse Extractor (grau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.	48,00

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 20 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3	D 3.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	C 5000	C 5100	C 5200	C 5300	C 5400
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8	D 3.8
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	C 5010	C 5110	C 5210	C 5310	C 5410
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3	D 4.3
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	C 5020	C 5120	C 5220	C 5320	C 5420
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR


Optiloc Abutment gerade

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- Empfohlenes Drehmoment: 30 Ncm

					
	■	■	■	■	■
Implantatanschluss	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0	D 5.0
Gingivahöhe	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm
Einsetzinstrument	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79	M 59 / M 79
Artikel-Nr.	C 5030	C 5130	C 5230	C 5330	C 5430
	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR	88,00 EUR

Optiloc Prozesspackung

- Matrizengehäuse Titan
- Retentionseinsatz weiß
Abzugsgewicht: light
- Retentionseinsatz gelb
Abzugsgewicht: medium
- Retentionseinsatz grün
Abzugsgewicht: strong
- Montagemanschette Silikon
- 2 Stück pro Packung

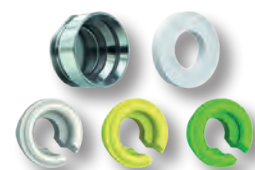

Titan

Material
Matrizengehäuse

Artikel-Nr.	5202.0001
	70,00 EUR

Bitte beachten: Die gesamte Produktübersicht finden Sie in der Rubrik Optiloc.

Eindrehinstrument Optiloc Abutment

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Hand und
Ratsche

Winkelstück

Artikel-Nr.	M 59	M 79
--------------------	-------------	-------------

59,00 EUR

59,00 EUR

Optiloc Modellanalog

- Aluminium




Ausführung

4 Stück

Artikel-Nr.	2102.0024
--------------------	------------------

73,00 EUR

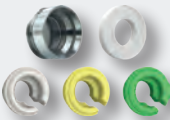Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung	Spezifikationen		Anzahl pro Einheit	Preis EUR
	5102.0000	Optiloc Equipment Box	Inkl. 3 Werkzeuge Instrument Braun 3202.0001 Instrument Blau 3202.0002 Instrument Grau 3202.0003 (ohne Verbrauchsmaterial)		1 Stk.	158,00
	5202.0001	Optiloc Prozesspackung Titan	• Matrizengehäuse aus Titan • Retentionseinsatz weiß • Retentionseinsatz gelb • Retentionseinsatz grün • Montagemanschette Silikon		2 Stk.	70,00
	2102.0001	Optiloc Matrizengehäuse Titan	Matrize: Titan		4 Stk.	59,00
	2102.0009	Optiloc Matrizengehäuse elliptic	Titan		4 Stk.	63,00
	Spezialzubehör 2102.0010	Optiloc Matrizengehäuse Titan mit Befestigungsoption	Matrize: Titan		4 Stk.	60,00
	Spezialzubehör 2102.0003	Optiloc Retentionseinsatz rot	PEEK Abzugskraft:	extra- light	4 Stk.	40,00
	2102.0004	Optiloc Retentionseinsatz weiß	PEEK Abzugskraft:	light	4 Stk.	40,00
	2102.0005	Optiloc Retentionseinsatz gelb	PEEK Abzugskraft:	medium	4 Stk.	40,00
	2102.0006	Optiloc Retentionseinsatz grün	PEEK Abzugskraft:	strong	4 Stk.	40,00
	2102.0007	Optiloc Retentionseinsatz blau	PEEK Abzugskraft:	extra-strong	4 Stk.	40,00
	Spezialzubehör 2102.0008	Optiloc Retentionseinsatz schwarz	PEEK Abzugskraft:	ultra- strong	4 Stk.	40,00
	2102.0024	Optiloc Modellanalog	Aluminium		4 Stk.	73,00
	2102.0012	Optiloc Abform-/Fixier-Matrize	PEEK		4 Stk.	58,00
	2102.0023	Optiloc Dublierplatzhalter	POM		4 Stk.	34,00
	2102.0011	Optiloc Montagemanschette Silikon	Silikon		10 Stk.	33,00
	3202.0002	Optiloc Eindrehwerkzeug + Model- lanalog Reponier-Hilfsinstrument (blau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.	58,00
	3202.0001	Optiloc Einsetz- und Aushebeinstru- ment für Retentionseinsätze (braun)	Aluminium, Stahl		1 Stk.	58,00
	3202.0003	Optiloc Matrizengehäuse Extractor (grau)	Aluminium, Stahl		1 Stk.	58,00

Werkzeug Prothetik

PreFace Abutmenthalter Universal

- Edelstahl



Artikel-Nr.

M 58

Bitte beachten:

Die Integration des Halters M 58 in die Fräsmaschine, als auch in die CAM-Software, erfordert dementsprechende fachliche Kenntnisse. Die Integration des Halters muss vom Kunden eigenständig und eigenverantwortlich durchgeführt werden. Die Inanspruchnahme der Serviceleistungen des Fräsmaschinenherstellers ist deshalb empfohlen.

PreFace-Abutment Prüfkörper



Ausführung

Titan Grade 5 KV

CoCr Legierung / WAK 14,1

Artikel-Nr.

M 20

M 60

15,00 EUR

20,00 EUR

Drehmomentschlüssel PreFace Abutmenthalter

- inkl. Bit-Einsatz Hex 3.0



Artikel-Nr.

M 21

49,00 EUR

Einsatz Hex 3.0

- Drehmomentschlüssel PreFace



Artikel-Nr.

M 29

5,00 EUR

Eindrehinstrument Hex 1.26

- gehärteter Edelstahl



Ausführung

Winkelstück

Winkelstück

Hand und Ratsche

Hand und Ratsche

Typ

lang

kurz

lang

kurz

Artikel-Nr.

M 03-1

M 09-1

M 10-1

M 11-1

18,00 EUR

18,00 EUR

34,00 EUR

34,00 EUR

Passend für:

BS-Serie, C-Serie, D-Serie, DT-Serie, EV-Serie, I-Serie, R-Serie, S-Serie, MedentiLOC Abutment gerade

Werkzeug Prothetik

Eindreheinstrument Kugel Torx

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Winkelstück	Winkelstück	Hand und Ratsche
Typ	L 30 mm	lang	lang
Artikel-Nr.	6-13-06	M 03-8	M 10-8
	18,00 EUR	18,00 EUR	34,00 EUR
Passend für: Novaloc Abutment abgewinkelt, Titanbasis ASC Flex			

Eindreheinstrument Optiloc Abutment

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche	Winkelstück
Artikel-Nr.	M 59	M 79
	59,00 EUR	59,00 EUR

Eindreheinstrument MedentiBASE Abutment

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 11-6
	48,00 EUR

Eindreheinstrument Multi-unit Abutment gerade

• Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 11-11
	48,00 EUR

Eindreheinstrument Schraubpatrize Hex 2.0

• gehärteter Edelstahl



Ausführung	Hand und Ratsche
Artikel-Nr.	M 11-10
	34,00 EUR

MedentiLOC Schraubpatrize Stege

- Titan Grade 5 KV
- TiN beschichtet
- M 2.0
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Artikel-Nr.	2000
	44,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der MedentiLOC Schraubpatrize benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 2,00 mm M 11-10.

Novaloc Schraubpatrize Stege

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- M 2.0
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Artikel-Nr.	6000
	54,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der Novaloc Schraubpatrize benötigen Sie das Eindrehinstrument Hex 2,00 mm M 11-10.

Optiloc Schraubpatrize Stege

- Titan Grade 5 KV
- ADLC beschichtet
- M 2.0
- Empfohlenes Drehmoment: 35 Ncm



Artikel-Nr.	5000
	54,00 EUR

Bitte beachten: Zum Eindrehen der geraden Optiloc Abutments benötigen Sie das spezielle Eindrehinstrument M 59 / M 79.

Drehmomentratsche

- mit Drehmomenteinstellung
- 10-40 Ncm
- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.	M 12
	125,00 EUR

Drehmomentratsche Chirurgie

- mit Serviceinstrument
- 10-45 Ncm
- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.	6-13-05
	189,00 EUR

Werkzeug Prothetik

Ratsche Chirurgie

- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.

6-13-01

143,00 EUR

Drehmomentaufsatz

- 10-45 Ncm
- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.

6-13-02

119,00 EUR

Serviceinstrument

- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.

6-13-03

14,00 EUR

Adapter ISO-Schaft

- Ratsche M 12
- gehärteter Edelstahl



Artikel-Nr.

M 14

38,00 EUR

Gingivamesslehre Altus



Artikel-Nr.

2013.901

49,00 EUR

Positionierkappen für Abformpfosten geschlossener Löffel

- POM



Ausführung

C, E, F, H, R, S, T

Artikel-Nr.

30

28,00 EUR

Werkzeug Prothetik

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	blau beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-1
	8,00 EUR

Passend für: C 1000 - C 1020, C 1100 - C 1120, C 1500 - C 1520, C 1500 - C 1520,

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	schwarz beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-2
	8,00 EUR

Passend für: B 1000, B 1100, B 1500, D 1000, D 1010, D 1100, D 1110, D 1200, D 1210, D 1300, D 1310, D 1500, D 1510, F 1100, F 1200, F 1300, F 1500, F 1000, L 1000, L 1010, L 1100, L 1110, L 1500, L 1510, S 1100, S 1200, S 1300, S 1500, S 1000

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	rot beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-3
	8,00 EUR

Passend für: BS 1010 - BS 1030, BS 1110 - BS 1130, BS 1510, BS 1520, S 1020, S 1220, S 1120, S 1320, S 1520

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	gelb beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-4
	8,00 EUR

Passend für: CX 1000, CX 1100, CX 1200, CX 1300, CX 1500, E 1000 - E 1030, E 1100 - E 1130, E 1500 - E 1520, F 1110, F 1210, F 1310, F 1510, F 1010, I 1000 - I 1020, I 1100 - I 1120, I 1500 - I 1520, K 1110, K 1510, K 1010, N 1010, N 1020, N 1110, N 1120, N 1510, N 1520, R 1000 - R 1020, R 1100 - R 1120, R 1500 - R 1520

Werkzeug Prothetik

Ausblockstift Schraubenkanal Titanbasis

• Aluminium



Ausführung	grau beschichtet
Artikel-Nr.	M 05-6
	8,00 EUR
Passend für:	C 1030, C 1040, C 1130, C 1140

Tool Kit Eindrehinstrument Hand und Ratsche



Artikel-Nr.	M 87
	238,00 EUR
Inhalt:	M 12, M 10-1, M 10-4, M 10-5

Tool Kit Eindrehinstrument Hand und Ratsche



Artikel-Nr.	M 88
	118,00 EUR
Inhalt:	M 10-1, M 10-4, M 10-5

Tool Box

• ohne Inhalt



Artikel-Nr.	M 89
	29,00 EUR

Sortierbox Abutments und Scanbody's

• 30 Fächer
• Polystyrol



Ausführung	ohne Inhalt
Artikel-Nr.	MB 04
	18,00 EUR

Werkzeug Prothetik

Prothetik Tray



Artikel-Nr.

M 77

128,00 EUR

Instrumentenhalter



Artikel-Nr.

M 85

24,00 EUR

Passend zu Artikelnummer 0-13-81, Erweiterung 6-fach

Tray Eco

- sterilisierbar
- inkl. Silikonmatte




Artikel-Nr.

M 76

48,00 EUR

Röntgenfolien Procone Implantat

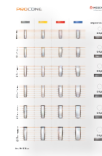

Artikel-Nr.

C 24-1

gratis für Kunden

Implantatpass



Artikel-Nr.

PM06_02_0003

gratis für Kunden



VERTRIEB DURCH MEDENTICAL CARE GMBH

PREISE

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

BESTELLUNG UND ZUSTELLUNG

Bei Bestelleingang Mo–Do bis 16.00 Uhr und Fr bis 14.00 Uhr erfolgt der Versand am gleichen Tag.

Zustellung im **Standardversand mit DPD** binnen 1-2 Werktagen zu 5,90 EUR.

Zustellung im **Expressversand mit Primetime oder EMS** am darauffolgenden Werktag bis 12.00 Uhr zu 10,90 EUR.

Preise ohne Gewähr, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Ab einem Netto-Warenwert von 300,- EUR übernehmen wir Ihren Versandkostenanteil des Standardversands in der Höhe von 5,90 EUR.

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto, 30 Tage netto.

Bei Bankeinzug gewähren wir 3% Skonto.

RÜCKSENDUNG/WARENTAUSCH

Im Schadensfall / Reklamationsfall ist in 1. Instanz die Medentical Care GmbH zu informieren

Die Medentical Care GmbH stimmt dem Umtausch oder der Rücksendung von Artikeln unter folgenden Bedingungen zu:

- Als Rücksendung wird nur einwandfreie, ungeöffnete Ware in freigemachten Sendungen mit Rechnungskopie akzeptiert.
- Bei nicht sterilen Artikeln ist eine Gutschrift/Rücksendung nur möglich, wenn die Ware spätestens bis 3 Monate nach Rechnungsdatum bei der Medentical Care GmbH eingeht und ungeöffnet ist.
- Bei sterilen Artikeln ist ein kostenloser Warenumtausch nur möglich, wenn die Ware ungeöffnet ist und eine Mindesthaltbarkeit von mindestens 12 Monaten aufweist.
- Sterile Produkte sind bei geöffneter Verpackung grundsätzlich vom Umtausch/der Rückgabe ausgeschlossen.



Herausgeber
Medentika® GmbH

Stand: Juli 2021

Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 13485
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG



Die elektronischen Gebrauchsanweisungen
zu unseren Produkten finden Sie auf unserer
Webseite www.medentika.com/ifu



PM01_02_0023_DE 07/21

» Passion for
Precision «

HERSTELLER

Medentika® GmbH
Hammweg 8–10
76549 Hügelsheim
info@medentika.de
www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2021. All rights reserved.
Medentika® and/or other trademarks and logos from Medentika® mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of Medentika® and/or its affiliates.

 **MEDENTIKA®**
A Straumann Group Brand